

Keto^{vet}

MONITORAMENTO DA β -CETONA SANGUÍNEA

Faça o controle da Cetose bovina no seu rebanho, garantindo maior produtividade e qualidade do seu leite!

O que é Cetose?

A Cetose é uma das principais doenças de vacas leiteiras, pouco conhecida no Brasil, que favorece a ocorrência de outras doenças e ocasiona grandes perdas econômicas. A sua maior prevalência é na forma subclínica, o que torna necessário um diagnóstico precoce e preciso para uma prevenção efetiva.

Importância do monitoramento da Cetose

O monitoramento preciso e precoce da doença é importante na Cetose subclínica, onde o animal não apresenta nenhuma manifestação clínica.

Agora o controle da Cetose ficou fácil! Sem depender da coleta de amostras para serem enviadas aos laboratórios, com o KetoVet o monitoramento pode ser realizado direto no campo, ao lado do animal. Simples, específico para uso veterinário e econômico, o aparelho digital KetoVet vai garantir a produtividade do seu leite.

Quando monitorar

- Pré-parto
- Pós-parto
- Mudança de dieta
- Período de pico de produção de leite
- Outras doenças clínicas

Porque usar o KetoVet

- Acompanhamento em tempo real do nível de Cetona
- Apenas 0,7 μ l de amostra de sangue total
- Resultado em 5 segundos
- Fácil manuseio, não requer treinamento especial
- Sistema pronto pra uso, sem a necessidade de preparar a amostra
- Chip de codificação para cada animal, aumentando a especificidade do resultado
- Armazenagem a temperatura ambiente, sem a necessidade de refrigeração
- Temperatura de operação em até 38°C



COMERCIALIZADO NOS PAÍSES



Alemanha



França




Turquia



Polónia



Procedimento

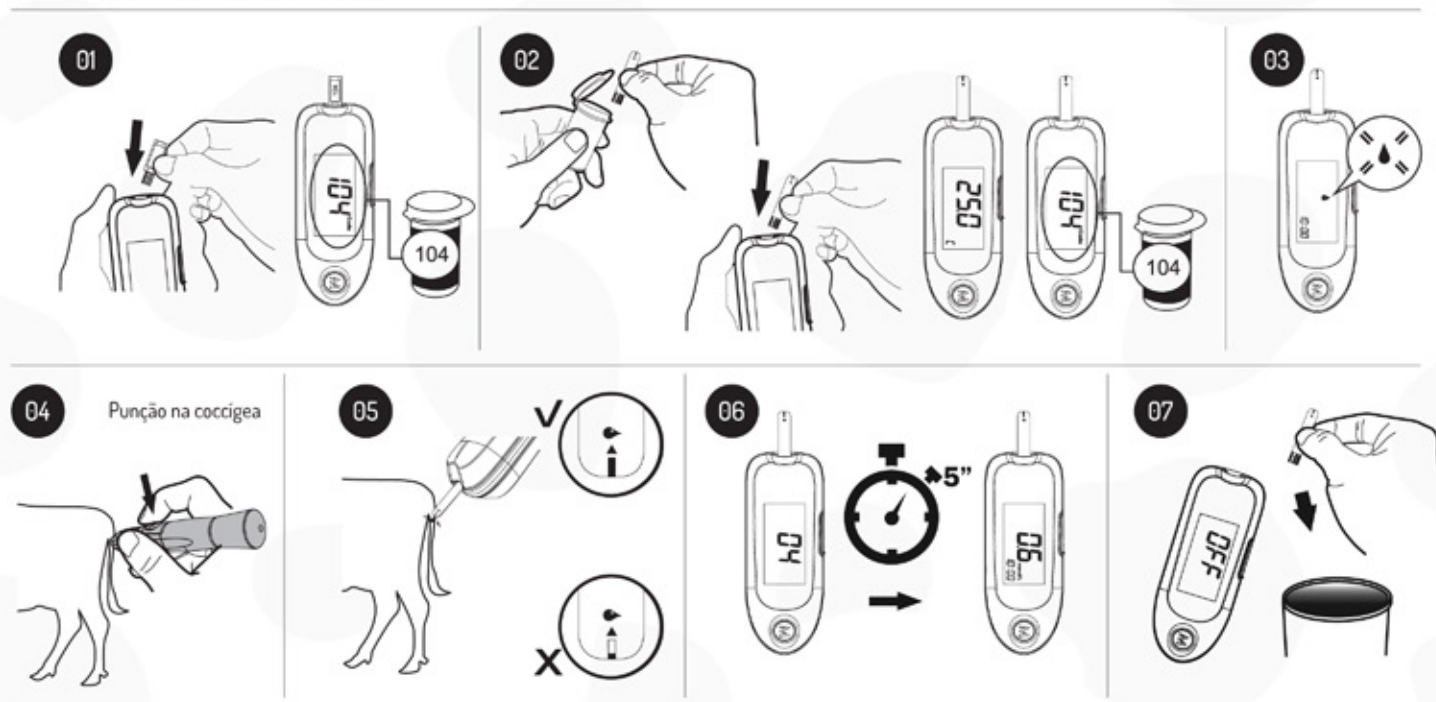

Tira Reagente



Eletrodos de Ouro

Melhor condutividade e maior estabilidade que os eletrodos feitos de carbono, aumentando a especificidade do resultado

Especificações

Tipo de enzima	β -hidroxibutirato
Quantidade de amostra	0.7 μ L
Tempo de reação	5 segundos
Faixa de medição	0.1 mmol/L - 8 mmol/L (1.0 mg/dL - 83.4 mg/dL)
Precisão	≤ 1 mmol/L, SD<0.1mM > 1mmol/L, CV<7.5%
Acurácia	± 0.5 mmol/L if 2mmol/L; $\pm 25\%$ if >2mmol/L
Transmissão de dados	USB
Fonte de energia	1 x AAA
Capacidade da memória	150 testes
Dimensão	36(L)x21,3(A)x93(C)mm
Painel	Painel LCD
Peso	45.4 g (com bateria)
Garantia	1 ano

Keto vet

Tel 31 3141.3566 • Av Prudente de Moraes, 901 • SI 1305 • Cidade Jardim • Belo Horizonte • MG • CEP 30.380.000



Vendas online: www.ketovet.com.br