

Vcheck fPL 2.0




Vcheck fPL 2.0 foi projetado para fornecer maior precisão e conveniência ao usuário




Maior precisão em baixas concentrações

Forte correlação do Vcheck fPL 2.0 ($R^2=0.98$) com laboratório "I" em comparação com produtos existentes ($R^2=0.86$).

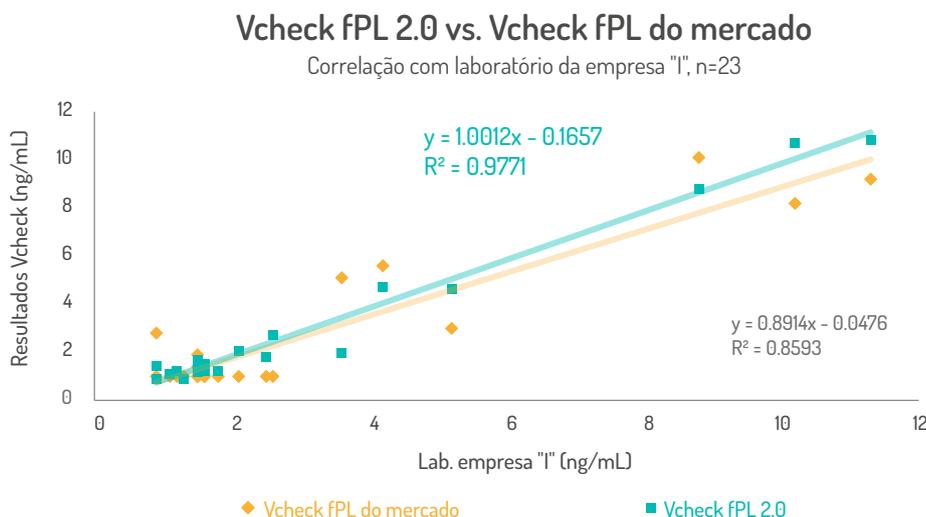


Usabilidade aprimorada

Agora além de amostra de soro, o kit está disponível para amostra de plasma e sangue total. A avaliação dos nossos resultados comprovam forte correlação dos testes realizados entre amostra de soro e plasma ($R^2=0.99$).

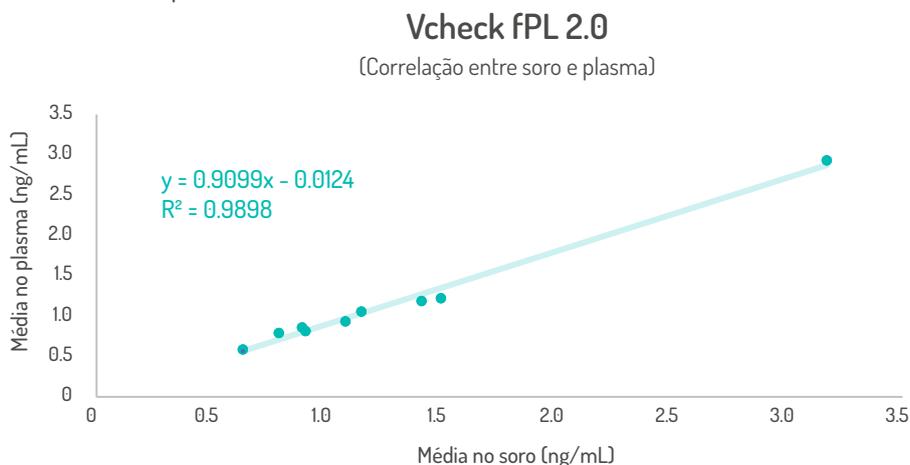

Procedimento do teste

O procedimento do teste é simples e fácil de realizar, melhorando a conveniência do usuário. Também, auxilia na redução de erros, o que aumenta a reprodutibilidade dos testes.

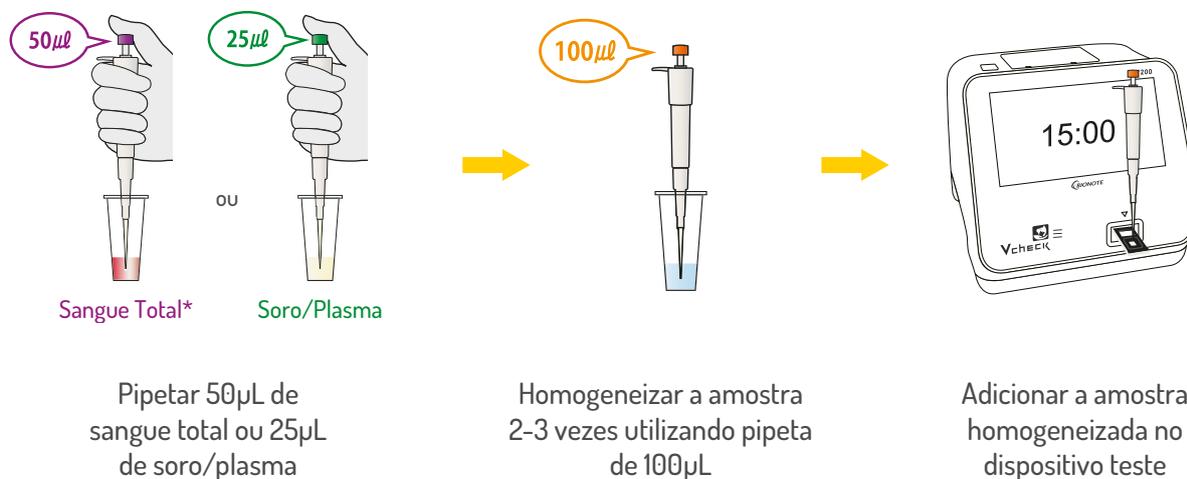

*Utilizar amostra de sangue total, pode afetar os resultados do teste, pois cada indivíduo tem diferentes níveis de hematócrito (HCT; porcentagem do volume de hemácias) no sangue. Níveis de HCT <20% podem causar valores falsamente altos e níveis de HCT >60% podem causar valores falsamente baixos.

Especificações



Amostra
Soro, Plasma: 25µL ou
Sangue Total: 50µL



Faixa de medição
1 - 50ng/mL



Tempo do teste
15 minutos

Informações do produto

Nome do produto	Amostra	Quantidade
Vcheck fPL 2.0	Soro, plasma e sangue total	10 Testes/kit

